



cheetah™

*Supace*



R82<sup>c</sup>

nothing compares to a smile!

www.supace.com  
info@supace.com  
telf: 93 357 04 27

# cheetah<sup>TM</sup>

Consulte con SUPACE la configuración estándar para España

### Crecimiento

Cheetah puede crecer de un talla al siguiente. Tanto el asiento como el respaldo se ajustan en anchura y profundidad haciendo que la silla crezca con el niño.



### Deslizamiento del asiento (basculación)

El asiento y el respaldo se pueden reclinar en un mismo proceso. El asiento se reclina de 0-20°. Gire la manivela bajo el asiento para permitir el ajuste.



### Centro de gravedad

El sistema de basculación corrige el centro de gravedad de la silla garantizando la estabilidad de ésta.



### Transporte seguro en vehículos


Cheetah ha sido sometida a pruebas y aprobada según la norma ISO 7176/19/2001 para un transporte seguro en vehículos de motor. (max. 57 kg)



Cheetah está disponible en dos versiones; 3 ruedas o 4 ruedas. La 3 ruedas está diseñada para usuarios más activos. Es fácil de maniobrar –incluso para niños con poca fuerza muscular. La 4 ruedas proporciona más estabilidad y alienta al niño a explorar el mundo.

Ambas sillas vienen equipadas con cojines -desarrolladas pensando en su comodidad. La composición del almohadillado de espuma con cuñas asegura una cómoda sedestación.

El diseño simple y aerodinámico convierte a Cheetah en una silla elegante pero también en una dura corredora -diseñada para jugar. La forma de Cheetah establece nuevos patrones para sillas de ruedas activas.

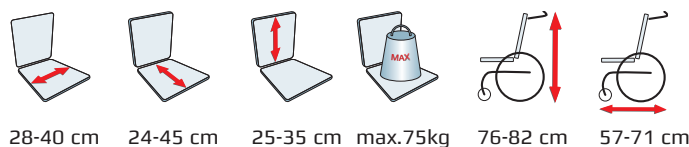



cheetah™

Supace

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR - opciones

Modelos

Cheetah, 3-ruedas  
Cheetah, 4-ruedas



Cojín para respaldo  
y asiento

Escoja el talla del  
cojín para la silla.




Disponible en cuatro tallas:  
Ancho 28 cm      Ancho 36 cm  
Ancho 32 cm      Ancho 40 cm

Color del chasis

Disponible en tres colores



Plateado

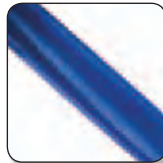


Azul



Rojo

Color de funda


Disponible en cuatro  
combinaciones  
de colores

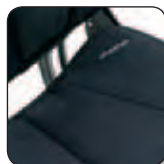


Negro/negro



Negro/gris

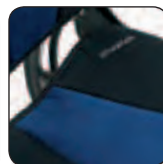

Negro/azul

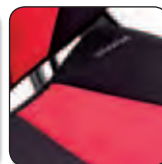

Negro/rojo



R82<sup>®</sup>

nothing compares to a smile!

www.supace.com  
info@supace.com  
telf: 93 357 04 27

### Frenos

Escoja entre los distintos frenos



Frenos de tambor



Frenos de ruedas (sólo 4 ruedas)

### Aro de propulsión



Estándar  
20", 22", 24"

### Ruedas delanteras

Escoja el talla de las ruedas delanteras



6" ruedas, hinchable o maciza, con o sin extracción rápida



4" ruedas maciza, con o sin extracción rápida





**cheetah™**

*Supace*

**ACCESORIOS**

**Asa de empuje**

900545

Para facilitar la  
tarea del ayudante



Talla Medidas  
28-40 H: 18 cm

**Extensión del**

**respaldo**

900055-xxx

Soporta el tronco del usuario



Talla Medidas  
28-32 H: 18 x W: 25 cm  
36-40 H: 22 x W: 29 cm

**Extensión  
del asiento**

900160. Ajusta la profundidad  
del asiento



Talla Medidas  
28-40 D: 6 cm

**Cincha del asiento**

900161-x

Para relleno del hueco entre  
el asiento y la extensión



Talla Medidas  
28-32 D: 5 cm  
36-40 D: 5 cm

**Reposabrazos**

900600-x

Proporciona soporte a los  
brazos del usuario



Talla Medidas  
S L: 20 cm  
L L: 30 cm

**Mesa**

900240-1

Véase la sección de accesorios  
al final del catálogo para más  
información sobre opciones y  
medidas.



**Reposabrazos para  
transferencia**

900722. Una óptima ayuda  
para sentarse en la silla



Talla única

**Plafones laterales  
para reposabrazos  
para transferencia**

900721. Proporciona control y posición



Talla única

**Plafones laterales**

900723-x

Proporciona control y posición



Talla Medidas  
P L: 29 cm  
G L: 36 cm

**Guardabarro**

900740

Protege al cojín de la suciedad  
procedente de la rueda



Talla única

**Taco abductor**

900130-x

Evita la aducción de las piernas del usuario



| Talla | Medidas             |
|-------|---------------------|
| P     | H:9 x W:9 x D:9 cm  |
| M     | H:9 x W:9 x D:12 cm |
| G     | H:9 x W:9 x D:15 cm |


**Fijación para transporte**

900900-01. Sometido a pruebas y aprobado según la norma ISO 7176/19/2001



Talla única

SUPACE Orto-Distribución S.L.  
 Distribuidor exclusivo para España

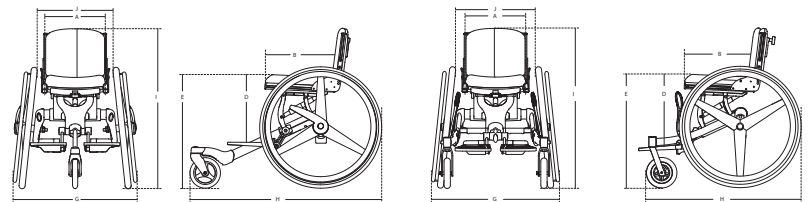

**Medidas, cm**

|  |                  |                  |                   |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>3-ruedas, ancho del asiento:</b>              | <b>28</b>        | <b>32</b>        | <b>36</b>         | <b>40</b>        |
| Ancho del asiento (A)                            | 28-32            | 32-36            | 36-40             | 40               |
| Profundidad del asiento (B)                      | 24-29            | 30-35            | 35-40             | 40-45            |
| Altura del respaldo (C)                          | 25-28            | 25-28            | 28-35             | 28-35            |
| Longitud de la tibia * (D)                       | 33               | 33-35            | 42-46             | 42-46            |
| Altura del asiento desde el suelo, frontal* (E)  | 50               | 50-53            | 50-55             | 50-56            |
| Ancho, cojín del respaldo                        | 28               | 32               | 36                | 40               |
| Ancho (G)  | 57               | 61               | 65                | 69               |
| Longitud (H)                                     | 90               | 90               | 90                | 90               |
| Altura (I)                                       | 76               | 76               | 82                | 82               |
| Espacio entre ruedas, superior (J)               | 33               | 37               | 41                | 45               |
| Altura, cojín del respaldo                       | 25               | 25               | 25                | 25               |
| Profundidad, cojín del asiento                   | 29               | 35               | 41                | 45               |
| Peso   | 10 kg (22 lb)    | 10 kg (22 lb)    | 10 kg (22 lb)     | 10 kg (22 lb)    |
| Peso máximo                                      | 75 kg (165 lb)   | 75 kg (165 lb)   | 75 kg (165 lb)    | 75 kg (165 lb)   |
| Peso máximo del usuario en vehículo              | 50 kg (110 lb)   | 50 kg (110 lb)   | 50 kg (110 lb)    | 50 kg (110 lb)   |
| <b>4-ruedas, ancho del asiento:</b>              | <b>28</b>        | <b>32</b>        | <b>36</b>         | <b>40</b>        |
| Ancho del asiento (A)                            | 28-32            | 32-36            | 36-40             | 40               |
| Profundidad del asiento (B)                      | 24-29            | 30-35            | 35-40             | 35-40            |
| Altura del respaldo (C)                          | 25-28            | 25-28            | 28-35             | 28-35            |
| Longitud de la tibia* (D)                        | 35               | 35-37            | 44-48             | 44-48            |
| Altura del asiento desde el suelo, frontal * (E) | 50               | 50-53            | 50-55             | 50-56            |
| Ancho, cojín del respaldo                        | 28               | 32               | 36                | 40               |
| Ancho, sin frenos de tambor (G)                  | 59               | 63               | 67                | 71               |
| Ancho, con frenos de tambor (G)                  | 57               | 61               | 65                | 69               |
| Longitud (H)                                     | 77               | 77               | 77                | 77               |
| Altura (I)                                       | 76               | 76               | 82                | 82               |
| Espacio, entre ruedas, superior, sin (J)         | 35               | 39               | 43                | 47               |
| Espacio, entre ruedas, superior, con DB          | 33               | 37               | 41                | 45               |
| Altura, cojín del respaldo                       | 25               | 25               | 25                | 25               |
| Ancho, cojín del asiento                         | 28               | 32               | 36                | 40               |
| Profundidad, cojín del asiento                   | 29               | 35               | 41                | 45               |
| Peso   | 11 kg (24 lb)    | 11 kg (24 lb)    | 11 kg (24 lb)     | 11 kg (24 lb)    |
| Peso máximo                                      | 75 kg (165 lb)   | 75 kg (165 lb)   | 75 kg (165 lb)    | 75 kg (165 lb)   |
| Peso máximo del usuario en vehículo              | 57 kg (125,5 lb) | 57 kg (125,5 lb) | 57 kg (125,5 lb)  | 57 kg (125,5 lb) |
| * Depende del ángulo del asiento                 |                  |                  |                   |                  |
| <b>Ángulos:</b>                                  | Respaldo:        | -10° - 28°       | Barra reposapiés: | 0° - 105°        |
|  | Asiento:         | 0° - 20°         | Curvatura:        | 6°               |