



# kudu™

Kudu es una práctica silla de ruedas de interior y exterior que combina diseño y funcionalidad, además de permitir los ajustes y soportes necesarios para obtener una postura cómoda. Se distribuye en 4 tallas, todas con características dinámicas que permiten ajustarlas al crecimiento del niño.



Kudu ha sido diseñada para ofrecer una excepcional adaptabilidad. La altura del respaldo y la profundidad del asiento pueden extenderse sin necesidad de cambiar los cojines. Las fundas de las partes acolchadas son de una sola pieza lo que proporciona comodidad al niño y aporta sencillez al diseño en general.

Una característica novedosa e importante de Kudu es el auto-centro de basculación que proporciona la posibilidad de bascular el asiento sin esfuerzo manteniendo el equilibrio óptimo. Kudu permanece estable con el respaldo reclinado al activar el auto-centro de basculación.

Los aspectos ergonómicos han sido tenidos en cuenta para incrementar la comodidad del niño y minimizar el esfuerzo del cuidador para maniobrar la silla de ruedas. Kudu ha sido diseñada para poder modificar el ángulo de reclinación del respaldo sin necesidad de utilizar herramientas. Cuando Kudu se deba transportar, el respaldo puede colocarse en posición horizontal y las ruedas pueden desmontarse.



26-38 cm



22-45 cm



37-63 cm




max. 60 kg



### Auto-centro de basculación/Reclinación del respaldo

Con el auto-centro de basculación el centro de gravedad permanece intacto. Esto también facilita la maniobrabilidad de la silla. La reclinación del respaldo puede ajustarse independientemente del asiento

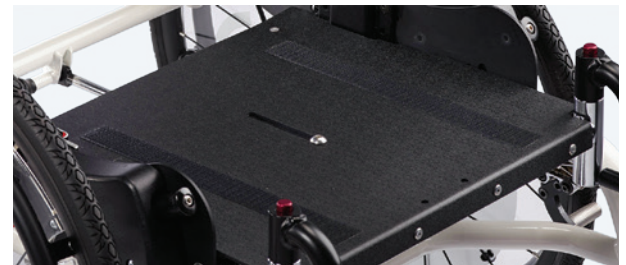

### Adaptable al crecimiento

La profundidad de la base del asiento es regulable así como la altura del respaldo



### Centro de gravedad

Las ruedas traseras pueden colocarse en tres posiciones diferentes lo que permite una mejor adaptación a las necesidades individuales, además de asegurar una posición óptima del centro de gravedad. El chasis de Kudu está construido de forma compacta y su reducida longitud lo hace fácil de maniobrar. Su estabilidad se mantiene incluso con una bolsa colgada



### Seguridad en el transporte

Kudu cumple con la normativa ISO 7176-19 para el transporte de niños en vehículos a motor (hasta un peso máximo de 57 kg)



## Tallas

95xxxxxx

Kudu está disponible en cuatro tallas. Puede pedirse tanto con manetas de empuje como con asa de empuje articulada



Kudu con asa de empuje articulada, frenos de tambor y frenos manuales




Kudu con manetas de empuje y frenos manuales

## Colores del chasis

Disponible en tres colores



Blanco

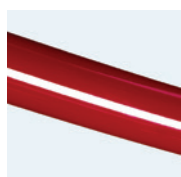

Rojo



Gris

## Cojines



Cojín para el respaldo




Cojín cobertor



Cojín para el asiento

## Asa y manetas de empuje

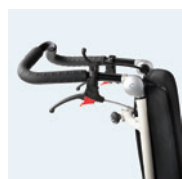

Asa de empuje articulada



Manetas de empuje

## Reposapiés

Puede elegir entre los diferentes tipos de reposapiés



Plataforma reposapiés con barra central



Reposapiés individuales, con barra lateral (disponibles para tallas 2, 3 y 4)

## Ruedas traseras

Puede elegir entre los diferentes tamaños de ruedas traseras: 20", 22" y 24", en su versión estándar están provistas del sistema quick release



12½" / 16" macizas o hinchables



20" / 22" / 24" macizas o hinchables

## Frenos

Puede elegir entre los diferentes tipos de frenos



Frenos manuales (disponible para ruedas de 20", 22" y 24")



Frenos de tambor

## Ruedas delanteras

Puede elegir entre los diferentes tamaños de ruedas delanteras



6" ruedas macizas



7" ruedas macizas o hinchables (pueden combinarse con ruedas traseras de 22" y 24")


## Dispositivos anti-vuelco y protector de radios



Dispositivos anti-vuelco



Protector de radios

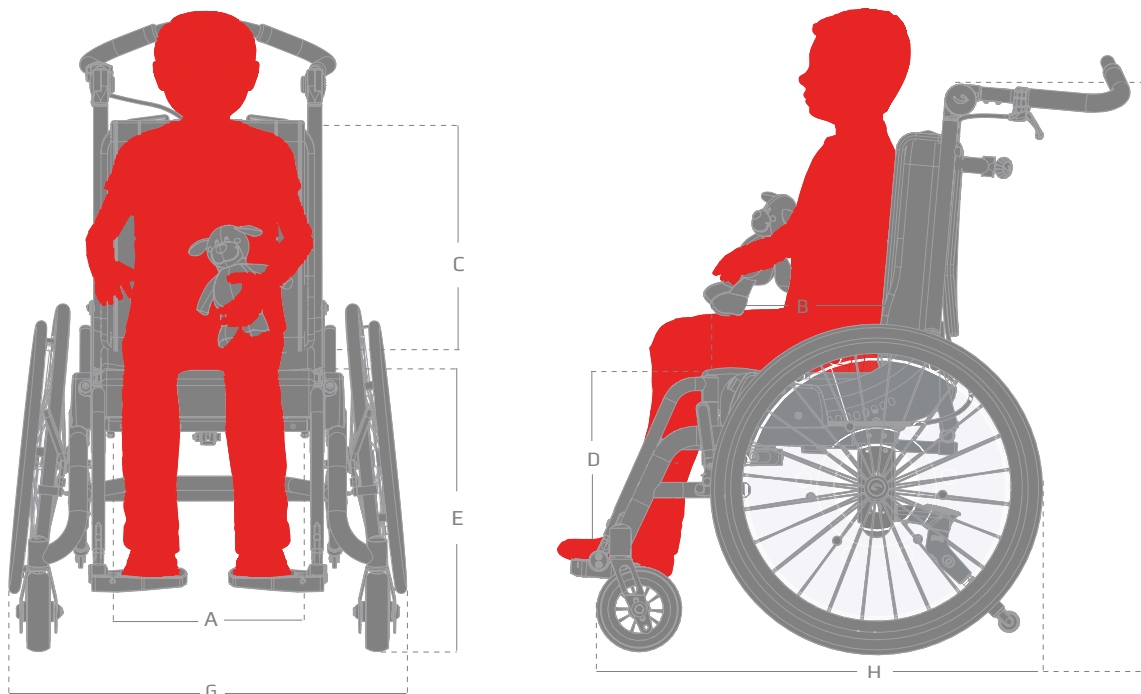

## Measurements

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Ancho del asiento (A)	26 (10")	30 (11¾")	34 (13¼")	38 (14½")
Profundidad del asiento (B)	18-26 cm (7-10¾")	18-30 cm (7-11¾")	18-34 cm (7-13")	18-38 cm (7-15")
Altura del respaldo (C)	37-46 (14½-18")	40-52 (15½-20")	43-58 (16½-22½")	4-63(17-24½")
Longitud de la tibia (D)	-	-	-	-
Reposapiés, instalación central	16-31 (6-12")	16-38 (6-14½")	26-45 (10-17½")	26-45 (10-17½")
Reposapiés, instalados en los laterales	-	25-35 (9½-13½)	30-48 (11½-18¾")	30-48 (11½-18¾")
Altura del asiento desde el suelo (E)	48 (18¾")	48 (18¾")	48 (18½")	48 (18½")
Ancho (G)	59 (23")	63 (24½")	67 (26")	71 (27½")
Longitud (H)	69 (27")	69 (27")	74 (29")	74 (29")
Altura (I)	94 (37")	94 (37")	94 (37")	94 (37")
Peso	19 kg (42 lb)	21 kg (46 lb)	23 kg (51 lb)	25 kg (55 lb)
Peso máximo del usuario	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	60 kg (132 lb)
Peso máximo del usuario en vehículo	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)	57 kg (125,5 lb)
	6°	6°	6°	6°

Las medidas de Kudu que figuran en la parte superior han sido tomadas con la siguiente configuración: ruedas traseras de 22", delanteras de 6", asa de empuje articulada y reposapiés individuales. Si modificamos la configuración los resultados serían distintos. Para obtener alguna de las medidas anteriores podría ser necesario realizar algún pequeño ajuste. Kudu se suministra con varios tipos de accesorios, por lo que el peso puede variar.



## ACCESORIOS



### Reposacabezas con funda

99xxxx-xx

Para un soporte y posicionamiento correctos

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Cojín de extensión del respaldo

95743-xxx

Soporte para la parte superior del respaldo

Talla	medidas
1	+5 ó +10 cm
2	+5 ó +10 cm
3	+5 ó +10 cm
4	+5 ó +10 cm



### Controles de tronco fijos

95401-xx

Tipo	medidas
0	W:9 X H: 10 cm
5	W:16 X H: 15 cm
6	W:12 X H: 14 cm



### Controles de tronco pivotantes

8310xx-xxx

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Reposabrazos, incluye plataformas laterales

95712x

Altura ajustable, proporciona soporte para los brazos

Talla única



### Mesa

9576350

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

Talla única



### Soportes de rodilla pivotantes

95860-xx

Proporciona control y posicionamiento

Tipo	Talla
1+2	Pequeña
3+4	Mediana



### Mochila

94480-x

Espacio extra para el transporte de objetos

Tipo	Talla
1+2	Pequeña
3+4	Mediana



### Soporte de pantorrillas

85131-xx

Para reposapiés individuales. Proporciona confort y soporte adicional

Talla única



### Soporte de pantorrillas

85131

Para reposapiés de plataforma. Proporciona confort y soporte adicional

Talla única



### Cinta talonera para reposapiés individuales

85132-xx

Talla única



### Guardabarros

9520xx

Disponibles para ruedas de 20", 22" y 24"

Talla única



## ACCESORIOS

**Fijaciones para transporte**

95900-10

De acuerdo a la normativa ISO 7176-19, para el transporte en vehículos a motor (peso máximo del usuario 57 kg)

Talla única

**Bandeja para equipo de respiración**

95281-10

Bandeja para transporte de equipo médico, carga máxima 20 kg

Talla única

**Asa de empuje articulada**

95629-x

Talla	Medidas
1	W:33 x D:27,5 cm
2	W:37 x D:27,5 cm
3	W:41 x D:27,5 cm
4	W:45 x D:27,5 cm

**Manetas de empuje**

95370-10

Talla	Medidas
1	W:43 x D:20 cm
2	W:47 x D:20 cm
3	W:51 x D:20 cm
4	W:55 x D:20 cm

**Reposapiés individuales**

95151-x60

Talla	Medidas
2	W: 14 x D: 13 cm
3	W: 15 x D: 13 cm
4	W: 18 x D: 13 cm

**Plataforma reposapiés con barra central**

95152-x60

Talla	Medidas
1	W: 26 x D: 19 cm
2	W: 31 x D: 19 cm
3	W: 36 x D: 23 cm
4	W: 41 x D: 24 cm







SENTADO/KUDU

[www.supace.com](http://www.supace.com)  
[info@supace.com](mailto:info@supace.com)  
telf: 93 357 04 27



R82<sup>®</sup>

*Supace*



Supace Ortodistribución S.L. Distribuidor exclusivo para España

