



wombat™


Wombat es una silla multiposicional activa para niños con alguna minusvalía. Asegura la experiencia de una comodidad, funcionalidad y soporte excepcionales.



Gracias a su original diseño, Wombat destaca como una silla activa de características excepcionales.

Wombat está disponible en dos versiones: Wombat basic y Wombat upgrade. La diferencia estriba en su chasis. La basic tiene un simple ajuste que regula la altura en la barra central. La upgrade está construida utilizando procesos de producción de alta tecnología que permiten al chasis ajustarse desde el nivel del suelo a la altura de la mesa.

Wombat está disponible en 3 tallas y está diseñada tanto para niños como para adolescentes.

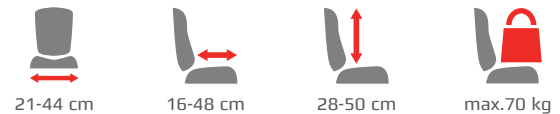


Basculación

El asiento se reclina de -20° a 15° proporcionando una postura de sedestación más o menos activa



Profundidad del asiento

La profundidad del asiento se puede fácilmente cambiar amoldándose a cualquier usuario solo con empujar hacia atrás o hacia adelante el respaldo

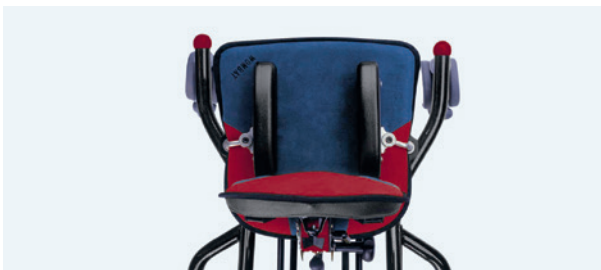

Anchura del asiento

Sólo con añadir el soporte de caderas (accesorio) se puede ajustar la anchura del asiento. además los soportes de caderas dirigen el peso a la cadera o a los muslos del usuario



Motor eléctrico

Wombat upgrade viene equipada con un motor eléctrico



Modelos

Basic; disponible en dos tallas




Basic



Upgrade

Frenos

El freno central facilita al usuario activar/ desactivar los frenos mientras está sentado

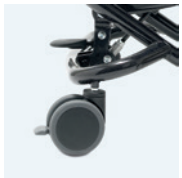

Freno manual



Freno central

Ajuste de altura

Escoja entre los diferentes mecanismos de ajuste de altura



Manual (sólo basic)



Pistón de gas (basic)



Pistón de gas (up-
grade)



Electrico (sólo
upgrade)

Color de la funda

Disponible en tres combinaciones de colores



Rojo/verde (sólo talla 1+2 -pedido especial en el Reino Unido)



Azul/Rojo



Negro/gris



Preparado para accesorios

El asiento de la Wombat está equipado con pinzas de sujeción y ranuras que facilitan el montaje de los accesorios




Reposapiés ajustable

El reposapiés elevable se ajusta en altura y ángulo

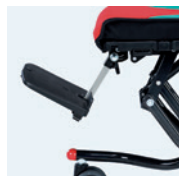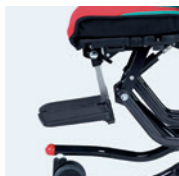

Wombat upgrade



El diseño y el ajuste de la talla 3 del asiento es diferente al de las tallas 1 y 2. Aún así, el ajuste de la altura del respaldo es muy fácil de lograr y el ángulo tanto del asiento como del respaldo se regula mediante la manivela colocada bajo el asiento

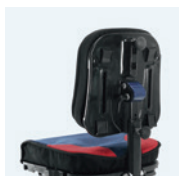

Talla 1+2




Talla 3

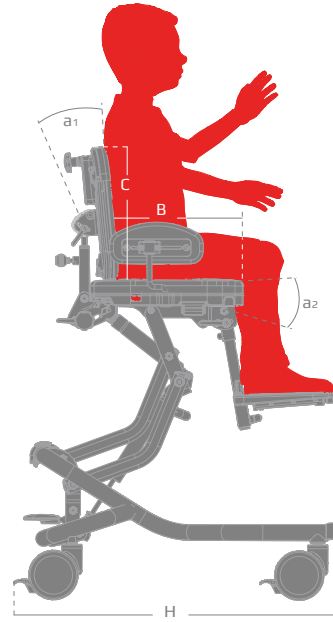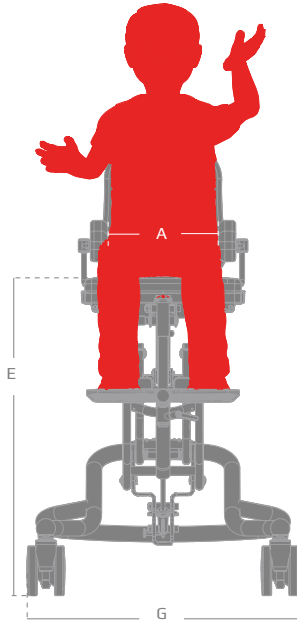

Medidas

	Wombat basic Talla 1	Wombat basic Talla 2	Wombat upgrade Talla 1	Wombat upgrade Talla 2	Wombat upgrade Talla 3
Ancho del asiento (A)	21-30 cm (8¼-11½")	28-37 cm (11-14½")	21-30 cm (8¼-11½")	28-37 cm (11-14½")	35-44 cm (13¾-17¼")
Profundidad del asiento (B)	16-29 cm (6¼-11¼")	23-36 cm (9-14")	16-29 cm (6¼-11¼")	23-36 cm (9-14")	30-48 cm (11½-18¾")
Altura del respaldo (C)	28-34 cm (11-13¾")	31-38 cm (12-14¾")	28-34 cm (11-13¾")	31-38 cm (12-14¾")	39-50 cm (15¼-19½")
Altura del asiento (E)	46-66 cm (18-25¾")	46-66 cm (18-25¾")	34-69 cm (13¼-27")	34-69 cm (13¼-27")	38-68 cm (14¾-26½")
Ángulo del respaldo (a1)	40°	40°	40°	40°	43°
Ángulo del asiento (a2)	-20° - +15°	-20° - +15°	-20° - +15°	-20° - +15°	-22° - +10°
Longitud del chasis	60 cm (23½")	60 cm (23½")	60 cm (23½")	60 cm (23½")	72 cm (28")
Ancho del chasis	55 cm (21½")	55 cm (21½")	55 cm (21½")	55 cm (21½")	61 cm (23¾")
Carga máxima	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)	70 kg (154 lb)
Peso	14,5 kg (32 lb)	14,5 kg (32 lb)	15,5 kg (34 lb)	15,5 kg (34 lb)	22 kg (48,5 lb)

ACCESORIOS

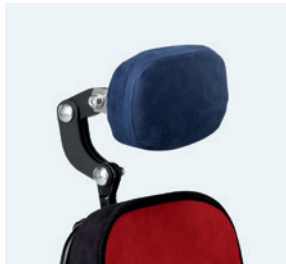

Reposacabezas

9913092-xx

Para una posición y soporte correcto

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Empuñaduras de empuje

95145, 95146

Para obtener una óptima posición ergonómica

Talla única



Controles de tronco

95120

Para soporte y seguridad adicional

Talla	Medidas
1+2	H:15 x D:11 cm



Controles de troncopivotantes

83210-x60

Para soporte y seguridad adicional

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Reposabrazos, juego

95112

Proporciona soporte al brazo

Talla	Medidas
1+2	H: 6-18 x W:8 x L:26cm
3	H: 6-18 x W:8 x L:26cm



Reposabrazos, barra extendible, juego

95113, 95115

Proporciona soporte al brazo


Talla	Medidas
1+2	H:12-21 x W:8 x L:29cm
3	H:6-18 x W:8 x L:37cm



Mesa tintada

9512x

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas

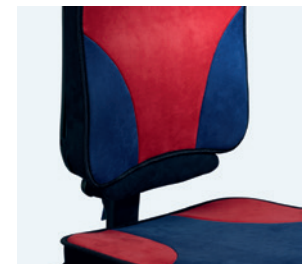

Pieza de extensión

95140-18

Sólo para talla 3. Soporta la parte inferior de la espalda del usuario

Talla	Medidas
3	H:6 x W:27 cm



Taco abductor

95130-x

Evita la aducción de las piernas del usuario

Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 x D:9 cm
2	H:9 x W:9 x D:12 cm
3	H:9 x W:9 x D:15 cm
4	H:9 x W:9 x D:18 cm



Controles pélvicos

9511x Ajusta el ancho del asiento corrigiendo la postura. Los controles pélvicos se necesitan para estrechar la anchura del asiento

Talla	Medidas
1	H:8 x W:19 cm
2+3	H:10 x W:25 cm



Soportes de rodilla pivotantes

9511x

Proporciona control y posición

Talla	Medidas
1+2	95116
3	95117




Sistema anti vuelco

95953 Ofrece una seguridad añadida al usuario. Sólo para Wobot upgrade

Talla única



ACCESORIOS

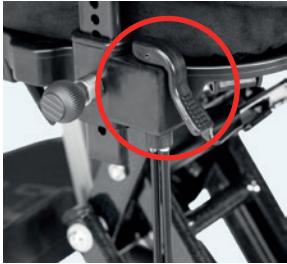

Kit de freno central

95949 Basic talla 1+2
95950 Upgrade talla 1+2
95951 Upgrade talla 3



Motor eléctrico
95550

Talla única



Asa de empuje articulable
95147
Para Wombat talla 3

Talla única



Ruedas con direccionadores
89592-KIT

