



caribouTM

Caribou es nuestro nuevo chasis bipedestador. Este chasis es un soporte para obtener una posición prona o supina. Proporciona la capacidad de cambiar de posición horizontal a vertical, Caribou ha sido diseñado para adaptarse a cualquier usuario.



Un posición correcta de bipedestación evita a los usuarios riesgos de espasticidad, contracturas y problemas circulatorios.

Caribou ha sido construido sobre una base y una serie de soportes disponibles para la parte superior del cuerpo para proporcionar una óptima libertad de movimientos. También disponemos de una amplia gama de accesorios para cubrir las necesidades específicas de cualquier usuario.

Caribou está disponible en 4 tallas y es adecuado para niños de entre 1 y 18 años.



0° - 87°



max. 100 kg



51-75 cm



75-111 cm



Facil posicionamiento

Caribou puede colocarse en posición vertical u horizontal. La posición horizontal facilita el trabajo del cuidador para colocar al usuario en Caribou



Diseño anatómico con soft PU

El nuevo material soft PU proporciona un óptimo confort. Caribou ha sido diseñado con bordes suaves para aumentar su seguridad y facilitar su limpieza



Accesorios intercambiables que proporcionan soluciones óptimas



Fácil inclinación

Caribou está equipado con un sencillo mecanismo de inclinación, el cual permite al cuidador tener libres las dos manos




Estándar

Caribou se distribuye en versión manual o con motor eléctrico



Color del chasis

Se distribuye en diferentes colores

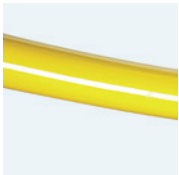


amarillo talla 1



rojo talla 2



azul talla 3

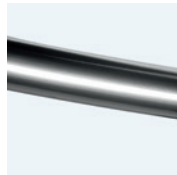

gris metalizado talla 4

Reposapiés

Los reposapiés independientes pueden ajustarse individualmente



Mecanismo de inclinación

De -3° a posición horizontal





Pedal para el pistón de gas



Con motor eléctrico

Para las tallas 3 y 4 es recomendable la versión que incorpora motor eléctrico, para facilitar la basculación

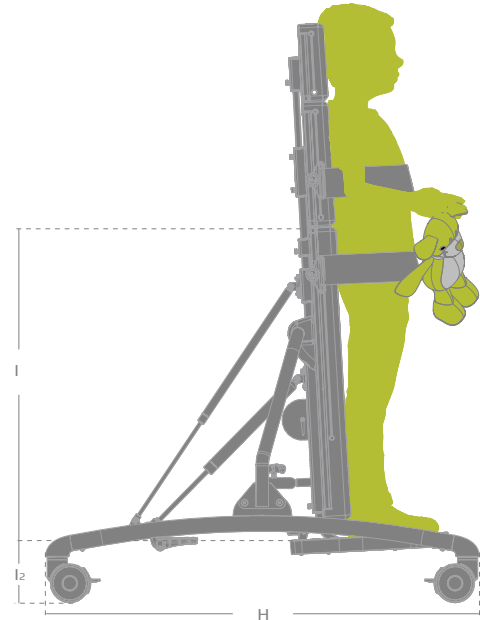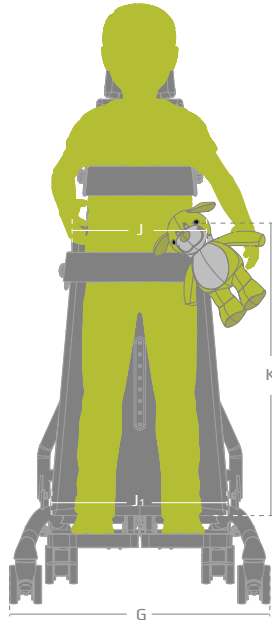

Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Anchura del chasis (G)	51 cm (20")	57 cm (22½")	65 cm (25¾")	75 cm (29¾")
Longitud del chasis (H)	75 cm (29¾")	92 cm (36")	111 cm (43¾")	111 cm (43¾")
Altura, vertical (I)	46-57 cm (18-22½")	53-64 cm (20¾-25¼")	68-79 cm (26¾-31")	88-99 cm (34¾-39")
Altura, horizontal	70 cm (27½")	70 cm (27½")	80 cm (31½")	80 cm (31½")
Altura, del suelo al chasis (I2)	13 cm (5")	13 cm (5")	13 cm (5")	13 cm (5")
Anchura de la plataforma, arriba-abajo(J+J1)	25-32 cm (9¾-12½")	30-38 cm (11¾-15")	35-46 cm (13¾-18")	40-55 cm (15¾-21¾")
Altura de la plataforma (K)	43 cm (17")	50 cm (19¾")	65 cm (25½")	85 cm (33½")
Ángulos	0 - 87° (0 - 87°)	0 - 87° (0 - 87°)	0 - 87° (0 - 87°)	0 - 87° (0 - 87°)
Inclinación de los reposapiés	-10 to 10°	-10 to 10°	-10 to 10°	-10 to 10°
Peso sin motor	20.5 kg (45.2lb)	24 kg (53lb)	30.5 kg (67.2lb)	35 kg (77.2lb)
Peso con motor	22.5 kg (49.6lb)	25.5kg (56.2lb)	32.5 kg (71.7lb)	37 kg (81.6 lb)
Peso máximo del usuario	40 kg (88.2lb)	60 kg (132.2lb)	80 kg (176.4lb)	100 kg (220.5lb)



ACCESORIOS



Plataforma superior
861101-x

Talla	Medidas
1	W1:15, W2:18, H:20 cm
2	W1:19, W2:23, H:25 cm
3	W1:22, W2:27, H:32 cm
4	W1:25, W2:31, H:40 cm



Cincha para pecho
86101-x

Talla	Medidas
1+2	W: 42-63 cm
3	W: 48-77 cm
4	W: 58-96 cm



Cinchas cruzadas
86102-x El punto donde se cruzan las cinchas debe colocarse a nivel del sacro

Talla	Medidas
1	38-49 cm
2	43-55 cm
3	53-70 cm
4	63-86 cm



Soportes laterales, par
861102-x La parte acolchada puede girarse modificando así la altura y la profundidad de los soportes laterales

Talla	Medidas
1	H:14 x W:9½ cm
2	H:18 x W:13 cm
3	H:18 x W:13 cm



Cincha para soportes laterales
86103-x
Para mayor sujeción

Talla	Medidas
1	26-32 cm
2	31-41 cm
3	34-50 cm



Set de soportes para hombro, par
861126-x
Especiales para posición supina

Talla	Medidas
1	W:7½, H:19, D:5 cm
2	W:8½, H:24, D:5 cm
3	W:10, H:31½, D:5 cm
4	W:11, H:39, D:5 cm



Cuñas para ranuras laterales
86107-x
Moldea el respaldo y sujeta el cuerpo



Plataforma reposacabezas
861116-x
Para usuarios que necesitan un ligero soporte para la cabeza

Talla	Medidas
1	W1:15, W2:18, H:20 cm
2	W1:19, W2:23, H:25 cm



Reposacabezas
Todas las plataformas y cojines extra están preparados para poder instalar un reposacabezas

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Cojines extra
861106-x
Se puede instalar como máximo 2 cojines extra

Talla	Medidas
1	W:25 x H:8 cm
2	W:30 x H:10 cm
3	W:35 x H:10 cm
4	W:40 x H:10 cm



Soporte sacro
861115-x
Proporciona una firme sujeción sobre el sacro

Dos tallas



Taco abductor
861103-x
Talla 1 para posición supina
Talla 2 para posición prona

Talla	Medidas
1	W1:5, W2:7, H:15, D:17 cm
2	W1:15, W2:7, H:15, D:9 cm

ACCESORIOS



Cinchas para taco abductor

862104-x

Proporciona soporte por encima de las rodillas

Dos tallas



Soportes de rodilla fijos

861144-x

Generalmente utilizados bajo la rodilla

Talla	Medidas
1	Para talla 1+2
2	Para talla 3+4



Soportes de rodilla fijos, articulados

861144-xx

Proporcionan soporte a la parte superior e inferior de las rodillas

Talla	Medidas
1	Para talla 1+2
2	Para talla 3+4



Soportes de rodilla pivotantes

861154-x

Generalmente utilizados bajo la rodilla

Talla	Medidas
1	Para talla 1+2
2	Para talla 3+4



Soportes de rodilla-pivotantes, articulados

861154-xx

Proporcionan soporte a la parte superior e inferior de las rodillas

Talla	Medidas
1	Para talla 1+2
2	Para talla 3+4



Zapatillas

8614x

Para posiciones prona y supina

Talla	Medidas
1	L: 21½ cm (para talla 1+2)
2	L: 24 cm (para talla 3+4)



Taloneras

86125x

Para posiciones prona y supina

Talla	Medidas
1	Para talla 1+2
2	Para talla 3+4



Mesa

862130-x

Mesa de plástico con cubeta y tapa. Puede utilizarse tanto en posición prona como supina

Talla	Medidas
2	Para talla 1+2
3	Para talla 3+4



Reposabrazos para mesa de plástico

861131

Especial para usar en posición supina. Talla única



Barra de juguetes para mesa de plástico

861135

Especial para usar en posición supina. Talla única



Barra de agarre para mesa de plástico

861136

Especial para usar en posición supina. Talla única