



## Superficies Especiales de Manejo de Presión - Baja Presión Continua

**APEX**

Para una mayor calidad de vida

# ACS LAL TURN

(0103008)



200 kg



COLCHÓN  
de REEMPLAZO



El sistema ACS LAL TURN aparte de suministrar la mejor terapia disponible para el tratamiento de las úlceras por presión, incorpora un sistema de lateralización ajustable hasta 30°. Este sistema ayuda a reducir las complicaciones pulmonares asociadas a la inmovilidad de los pacientes y permite hacer cambios posturales de forma automática.

### MAYOR CONFORT

Ajuste de presión en 7 niveles.  
Función de lateralización. Posibilidad de ajustar el ángulo (15°-30°), tiempo (5, 30 o 60 min) y modo (izquierda, derecha y centro).  
Cubierta elástica sin costuras, fabricada en poliuretano.

### MAYOR SEGURIDAD

Refuerzos laterales para prevenir caídas.  
Válvula CPR que desinfla el colchón en 10-15 segundos.  
Alarma audible y visual en caso de avería, fallo eléctrico y CPR.  
Filtro de aire antibacterias.  
Posibilidad de incorporar un foam de 5 cm.




## DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensión colchón:	2000 x 900 x 255 mm
• Dimensión compresor:	380 x 158 x 268 mm
• Peso colchón:	7,5 kg
• Peso compresor:	5,5 kg
• Unidades por caja exterior:	1
• Dimensión total de la caja exterior:	517 x 463 x 557 mm
• Peso total de la caja exterior:	19,5 kg



Válvula CPR

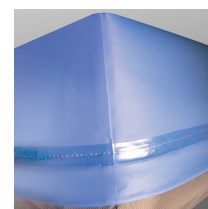

Costura reforzada



Función de laterización

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Compresor:	
Voltaje:	AC220 - 240V, 50/60 Hz - 3,0A
Máxima salida de aire (lpm):	1.300 litros/min.
Rango de presión:	7 niveles
Ángulo de lateralización:	2 niveles (15° o 30° grados)
Funciones:	Botón de encendido y apagado. Bloqueo de panel. Max Firm. CPR Modo de lateralización: izquierda, derecha o centro Tiempo entre intervalos de reposo: 5, 30 o 60 min.
Alarma audible y visible que indica:	Avería, fallo eléctrico, CPR. Botón para silenciar la alarma
• Colchón de reemplazo (Materiales):	
Funda:	Elástica / Poliéster / PU
Celdas:	Nylon / PU (20 celdas de 20,32 cm y 2 protectores laterales de 25,5 cm)
Base:	Nylon / PU
• Nivel sonoro:	46 dBA
• Peso máximo soportado:	200 kg

## GARANTÍA

- ACS LAL TURN: 2 años\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS

