



Nano Posicionadores

Cambios Posturales

Nano Posicionadores

Los Nano Posicionadores Apex son dispositivos médicos que aseguran un adecuado soporte postural en el paciente acostado. Evitan posturas inadecuadas y ayudan a prevenir y tratar las úlceras por presión facilitando los cambios posturales. Al utilizar los Nano Posicionadores la superficie de contacto aumenta, reduciendo la presión ejercida sobre los tejidos (principio de inmersión).

Los Nano Posicionadores están fabricados con micro partículas de poliestireno espumado que ayudan al paciente a encontrar la postura idónea en la cama, aumentando su bienestar.

La funda fabricada en poliuretano se amolda al cuerpo del paciente minimizando la fricción y proporcionando un óptimo microclima.


Cuenta con un protocolo de limpieza que evita el riesgo de contaminación bacteriana.

Nano-Decúbitus Lateral:



El Nano- Decúbitus Lateral ayuda a posicionar al paciente en decúbitus semi-lateral con 30° de inclinación, siguiendo las recomendaciones de la EPUAP en materia de prevención en úlceras por presión. Este posicionador proporciona una comodidad extra en las rodillas, la pelvis y el tronco.

Nano-Delta:

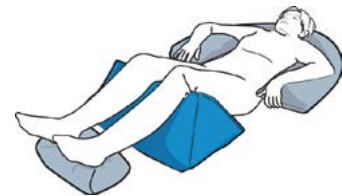

El Nano-Delta puede ser utilizado en la posición decúbito lateral para dar soporte a la espalda. También es posible ubicarlo debajo de las rodillas en posición semi-fowler.

Nano-Cilíndrico:



El Nano-Cilíndrico permite al paciente elevar el pie para reducir la hinchazón. Puede ser también utilizado en posición semi-fowler colocándolo debajo de las rodillas.

Está disponible en dos tamaños: estándar y pequeño.

Nano-Universal:



El Nano-Universal puede ser utilizado como una solución completa de posicionamiento ubicándolo en diferentes zonas del paciente. Es particularmente eficaz en la zona occipital, talones y brazos. Está disponible en dos tamaños: estándar y pequeño.

Nano Media-Luna:



El Nano Media-Luna ayuda a mantener equilibrados el tronco y la pelvis del paciente en posición decúbito supino y semi Fowler, consiguiendo un alivio de presión en los codos. Se puede invertir la posición del cojín, colocándolo por debajo de las rodillas y aliviando la presión de los brazos.

Nano-Abducción:



El Nano-Abducción ayuda al mantenimiento estable de la cadera. También permite colocar el brazo en abducción siendo muy útil en la fijación post-operatoria. Resulta cómodo y alivia la sensación de dolor.

Nano-Talonera:



La Nano-Talonera permite aliviar la presión en la zona de los talones pudiéndose combinar con otros posicionadores. Puede ser utilizado permitiendo la descarga total (colocándolo en los talones) o parcial (colocándolo por encima de los talones) de la presión.

Nano-Anillo:



El Nano-Anillo da soporte en la zona de la cabeza. Puede combinarse con el Nano-Cilíndrico en posición de semi-fowler gracias a su velcro sellante.

	Posición del paciente				Zonas		
	Decúbito Lateral	Decúbito Supino	Semi-Fowler	Cabeza	Tronco	Extremidades Superiores	Extremidades Inferiores
Nano-Decúbitus Lateral	•				•	•	•
Nano-Delta	•		•		•		•
Nano-Cilíndrico	•		•				•
Nano-Universal		•	•	•		•	•
Nano Media-Luna		•	•	•	•	•	
Nano-Abducción		•	•		•	•	
Nano-Talonera		•	•				•
Nano-Anillo		•	•	•			

Descripción de producto	Referencia
Nano-Decúbitus Lateral	0112031
Nano-Delta	0112035
Nano-Cilíndrico Estándar	0112033
Nano-Cilíndrico Pequeño	0112040
Nano-Universal Estándar	0112039
Nano-Universal Pequeño	0112041
Nano Media-Luna	0112032
Nano-Abducción	0112037
Nano-Talonera	0112034
Nano-Anillo	0112038

Especificaciones técnicas	Nano-Decúbitus Lateral	Nano-Delta	Nano-Cilíndrico	Nano-Universal	Nano Media-Luna	Nano-Abducción	Nano-Talonera	Nano-Anillo
Dimensiones (largo x ancho)	170 x 27 cm	56 x 28,5 x cm	30 x 18 cm 60 x 18 cm	38 x 30 cm 56 x 37 cm	146 x 23 cm	30 x 23 cm	82 x 17 cm	15 x 100 cm
Peso del producto	2 kg	1,5 kg	0,35 kg / 0,7 kg	0,3 kg / 0,8 kg	9 kg	0,4 kg	0,7 kg	0,6 kg
Material	Micro partículas de poliestireno							
Funda	Poliuretano. Cremallera con solapa protectora. Lavable							
Protocolo de limpieza								
Garantía	2 años							



Care for a Healthy Life

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com