


# Relievo Visco

Superficies Especiales de Manejo de Presión

El colchón Relievo Visco es la SEMP Apex fabricada con una doble capa: una superior de visco elástica de 5 cm y una base de espuma de 10 cm.

Su base está fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad para dar firmeza a la SEMP. Está diseñada con cortes transversales para una mayor adaptación en camas articuladas.

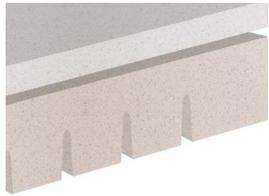

Su funda bielástica, fabricada con tejido de poliuretano, se adapta al cuerpo del paciente. Es transpirable e impermeable a líquidos. Incluye cremallera en U protegida con una solapa para evitar la entrada de líquidos.



Soporta un peso de paciente de hasta 120 kg.

Descripción de Producto	Referencia
Relievo Visco 90 cm	01130005
Relievo Visco 105 cm *bajo pedido*	01130005-105

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	40 x 40 x 92 cm
Peso total de la caja	9,5 kg

Especificaciones técnicas	
Medidas del colchón 90 cm	190 x 90 x 15 cm
Medidas del colchón 105 cm	190 x 105 x 15 cm
Base del colchón	10 cm de Poliuretano 25 kg/m <sup>3</sup> - 4 kPa Con cortes para un mejor ajuste en camas articuladas
Capa superior	5 cm de 45 kg/m <sup>3</sup>
Peso máximo soportado	120 kg
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años

Especificaciones de la funda	
Material	PU impermeable bielástica
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Antialérgica	Sí
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años

**APEX**  
Care for a Healthy Life

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com