


Relievo Start

Superficies Especiales de Manejo de Presión

El colchón Relievo Start es la SEMP Apex estática idónea para un uso domiciliario y sociosanitario.

Relievo Start es una superficie compuesta por espuma de alta calidad, cuyo diseño en cubos independientes proporciona una distribución de la presión equilibrada y permite la circulación del flujo de aire reduciendo la temperatura de la superficie.

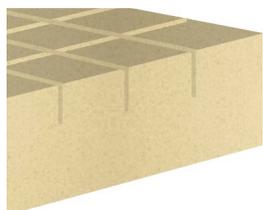

Su espuma de poliuretano de alta densidad da firmeza óptima a la SEMP.

Su funda bielástica, fabricada con tejido de poliuretano, se adapta al cuerpo del paciente. Es transpirable e impermeable a líquidos. Incluye cremallera en U protegida con una solapa para evitar la entrada de líquidos.



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

Descripción de Producto	Referencia
Relievo Start 90 cm	01130004
Relievo Start 105 cm *bajo pedido*	01130004-105

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	40 x 40 x 92 cm
Peso total de la caja	9,5 kg

Especificaciones técnicas	
Medidas del colchón 90 cm	190 x 90 x 15 cm
Medidas del colchón 105 cm	190 x 105 x 15 cm
Base del colchón	15 cm de Poliuretano 30 kg/m ³ - 3,5 kPa
Peso máximo soportado	120 kg
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	4 años

Especificaciones de la funda	
Material	PU impermeable bielástica
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Antialérgica	Sí
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años

