

Relievo Pro


Superficies Especiales de Manejo de Presión

El colchón Relievo Pro es la SEMP Apex estática idónea para un uso profesional.

Relievo Pro es una superficie fabricada mediante materiales con propiedades únicas y diseñada especialmente para proporcionar al usuario el máximo confort.

Esta superficie está compuesta por 2 capas de espuma de alta densidad y bordes reforzados en los laterales:

- Una capa superior visco de 60 kg/m³ de densidad que permite que el colchón mantenga su firmeza independientemente de la temperatura ambiental. Su estructura única de célula abierta mejora el flujo de aire en un 95%. De esta manera, se produce una espuma respirable e inodora.
- Bordes reforzados que permiten incorporar al paciente de forma segura para realizar las labores de cuidado. Además, facilita las transferencias del paciente de la cama a la silla de ruedas.
- Una base de espuma de poliuretano de alta densidad para dar firmeza a la SEMP. Está diseñada con cortes transversales para una mayor adaptación en camas articuladas.

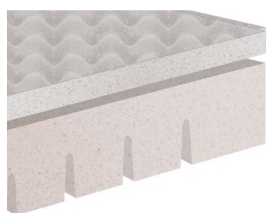

Su funda bielástica, fabricada con tejido de poliuretano, se adapta al cuerpo del paciente. Es transpirable e impermeable a líquidos. Incluye cremallera en U protegida con una solapa para evitar la entrada de líquidos.



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

Descripción de Producto	Referencia
Relievo Pro 90 cm	01130007
Relievo Pro 105 cm *bajo pedido*	01130007-105

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	40 x 40 x 92 cm
Peso total de la caja	10,5 kg

Especificaciones técnicas	
Medidas del colchón 90 cm	190 x 90 x 15 cm
Medidas del colchón 105 cm	190 x 105 x 15 cm
Base del colchón	10 cm de Poliuretano 30 kg/m ³ - 4,4 kPa Con cortes para un mejor ajuste en camas articuladas
Capa superior	5 cm de 60 kg/m ³
Bordes reforzados	7 cm 30 kg/m ³ de 4,9 kPa
Peso máximo soportado	130 kg
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	4 años

Especificaciones de la funda	
Material	PU impermeable bielástica
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Antialérgica	Sí
Protocolo de limpieza	
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años

