




Easy Pulse

Oxigenoterapia

Easy Pulse

Concentrador Portátil de Oxígeno

Easy Pulse es el concentrador portátil de oxígeno de Apex idóneo para pacientes que requieren de oxigenoterapia sin renunciar a su estilo de vida. Está basado en la tecnología de flujo a demanda. Frente a la tecnología que suministra un flujo continuo, en el flujo a demanda, el bolo de oxígeno se suministra al paciente al inicio del proceso de inspiración.

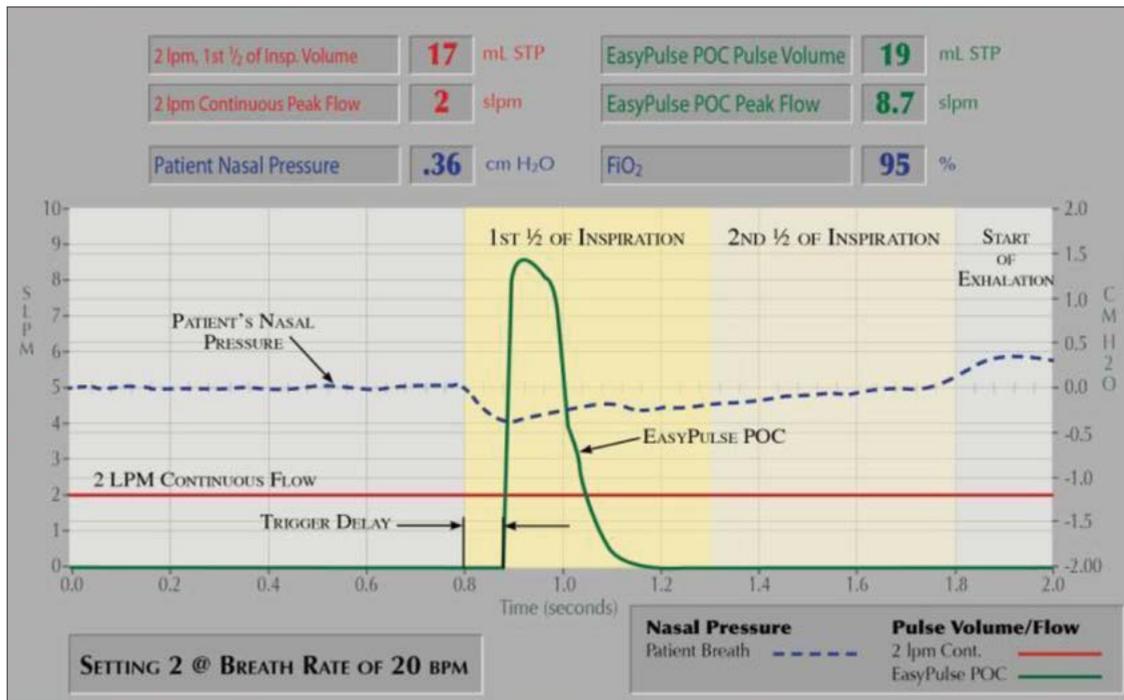

Volumen oxígeno por minuto (a nivel del mar)

Ajuste 1	240 ± 15% ml/min
Ajuste 2	380 ± 15% ml/min
Ajuste 3	520 ± 15% ml/min
Ajuste 4	660 ± 15% ml/min
Ajuste 5	780 ± 15% ml/min

En comparación con los equipos de flujo continuo, el Easy Pulse es compacto (25,7 x 16,5 x 11,4 cm) y ligero (2,98 kg), proporcionando un flujo de oxígeno con la misma cantidad y pureza. El Easy Pulse proporciona al paciente un suministro de oxígeno sin limitaciones fuera del hogar con una concentración de O₂ de 87 - 95%. El flujo de oxígeno es regulable en 5 niveles.

La autonomía del Easy Pulse es superior a las 3 horas en posición 2. Además es posible acoplar una batería externa que duplica su duración.

El Easy Pulse cuenta con 5 alarmas que aseguran un correcto funcionamiento del equipo: sobrecalentamiento, alta y baja presión, fallo del sistema y fallo del ciclo.

El equipo incorpora filtros que impiden la entrada de suciedad alargando su vida útil.



Se suministra con una bolsa de transporte.

Elementos destacados:



Accesorios:



Batería externa



Mochila



Carrito con ruedas

Descripción de producto	Referencia
Easy Pulse	0208033
Descripción de accesorios	
Batería externa	0208004
Mochila	0208005
Carrito con ruedas	0208006

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	41 x 28 x 36 cm
Peso total de la caja	6 kg



El Easy Pulse incluye bolsa de transporte

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	25,7 x 16,5 x 11,4 cm
Peso	2,98 kg
Voltaje	AC 100-240VAC / CC 11-16 VDC
Modo de funcionamiento	A demanda
Volumen de oxígeno por minuto a nivel del mar	Ajuste 1: 240 ± 15% ml/min Ajuste 2: 380 ± 15% ml/min Ajuste 3: 520 ± 15% ml/min Ajuste 4: 660 ± 15% ml/min Ajuste 5: 780 ± 15% ml/min
Duración de la batería interna	Ajuste 1: 4,7 hrs Ajuste 2: 3,4 hrs Ajuste 3: 2,7 hrs Ajuste 4: 2 hrs Ajuste 5: 1,6 hrs
Nivel sonoro	40 dBA (en ajuste 2)
Alarmas	5 tipos: sobrecalentamiento, alta y baja presión, fallo del sistema y fallo del ciclo
Certificados	ISO 13485 IP 21 Federal Aviation Administration FDA EN 1041:2008 ISO 15223-1:2012 EN ISO 14971:2012 EN 60601-1:2005 (3 rd Edition) EN 60601-1-2:2007 EN 60601-1-4:1996 EN 60601-1-8:2007 EN 62366:2008 EN ISO 3744:2010 EN ISO 8359:2009 +Amd.1:2012 EN ISO 15001:2011 ISO 13485:2003 2006/66/EC
Garantía	Concentrador 4 años Baterías 6 meses



APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com